


hydrorise

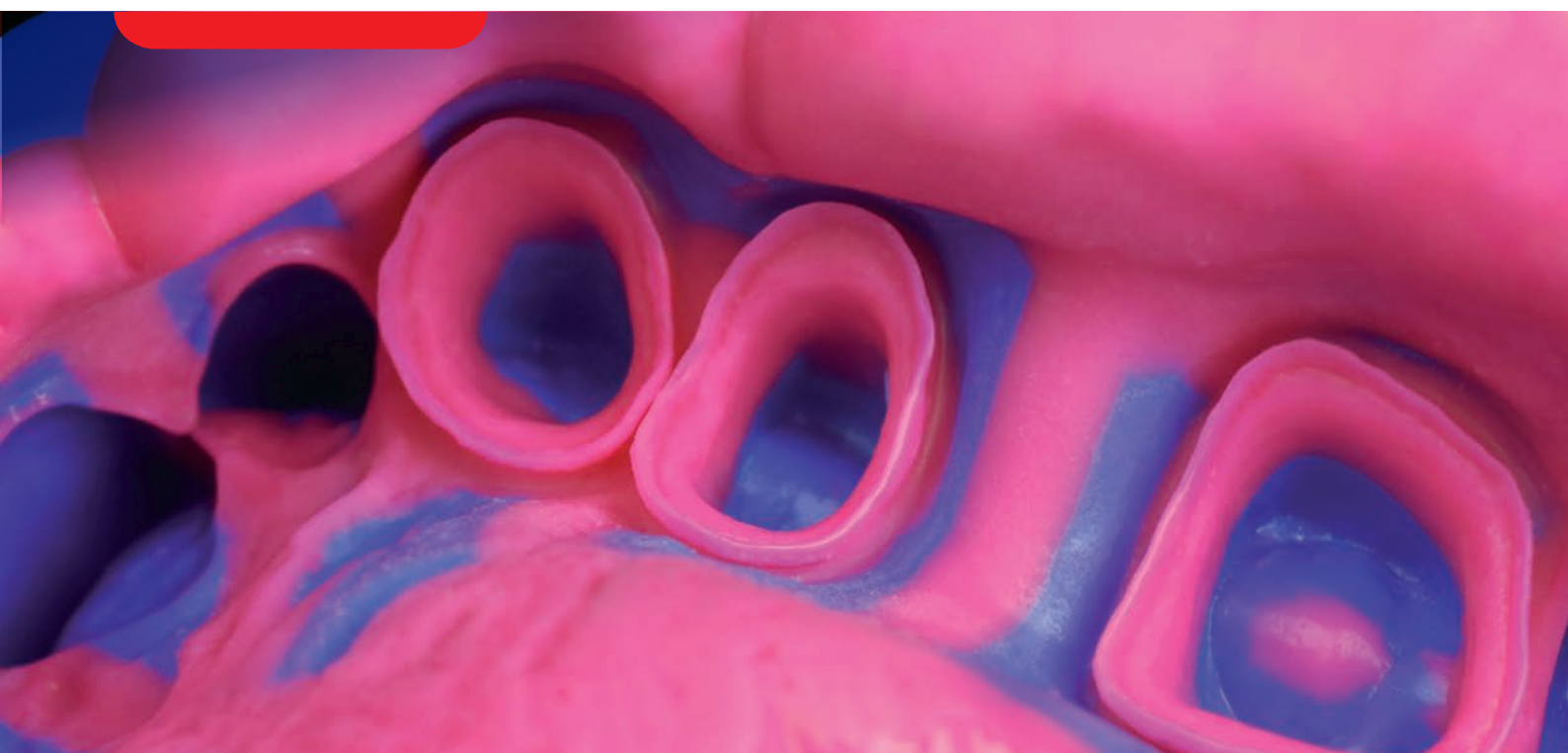

THE INNOVATION THAT DID NOT EXIST

Hydrokompatibles A-Silikon für höchst präzise Abformungen

Zhermack 
Dental


Hydrorise, the innovation
that did not exist



Hydrorise ist ein hyper-hydrokompatibles A-Silikon, welches für diverse Abformtechniken und bei verschiedenen klinischen Situationen, auch unter schwierigsten Bedingungen, verwendet werden kann.

Mit **Hydrorise** wird die Kombination verschiedener Viskositäten mit unterschiedlichen Abbindezeiten ermöglicht, um für jede spezifische Abformung beste Ergebnisse zu erzielen.

Dank einer Technologie, der sogenannten "Hyper-Hydrokompatibilität", erreicht Hydrorise ein exklusives Ergebnis. Sie erhöht die Fließfähigkeit des Silikons und verbessert dadurch die Auflösung des Abdrucks.

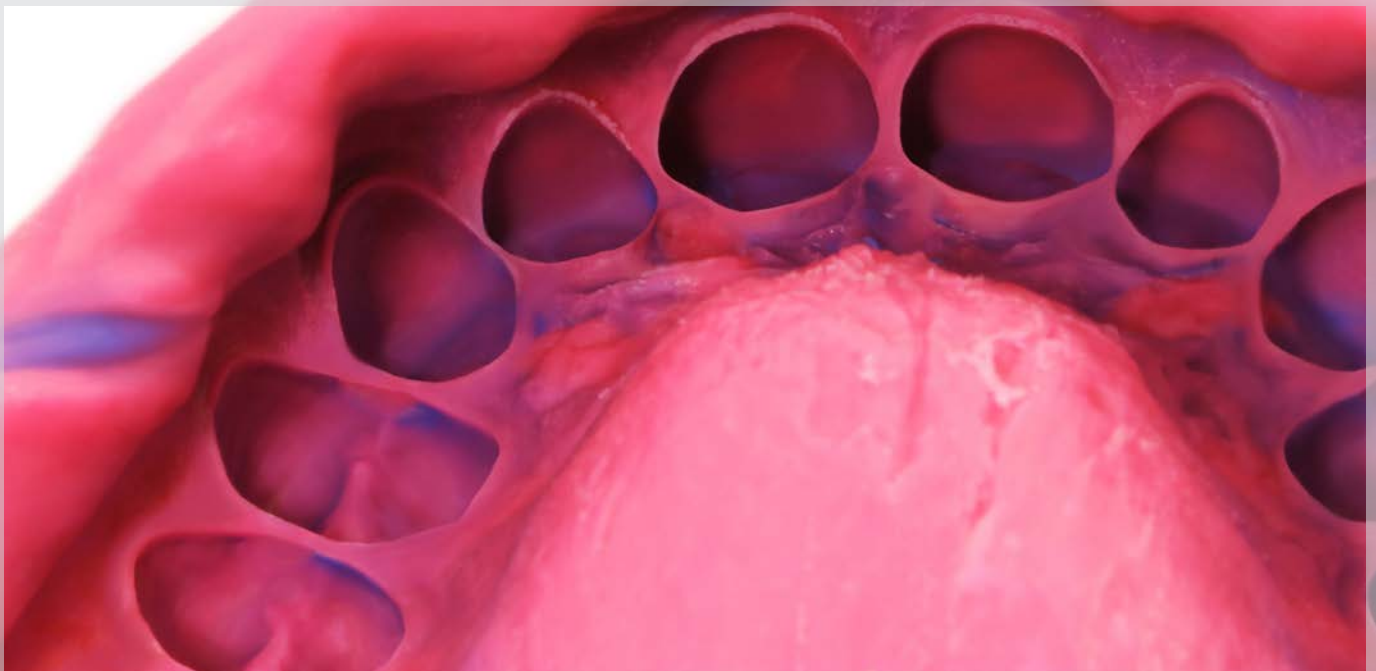


Präzision

Hyper-Hydrokompatible Technologie



HYPER-HYDROKOMPATIBILITÄT


- ▶ Die exklusive Technologie, von der Zhermack-Forschung entwickelt, macht Hydorise überaus hydrokompatibel. Ein auf dem Markt einzigartiges Material.

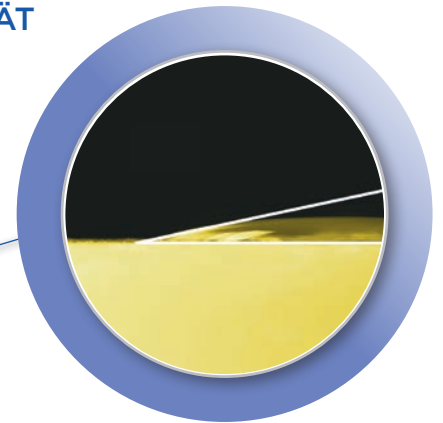

SEHR KLEINER KONTAKTWINKEL*


(Version Light und Extra Light)

- ▶ Je kleiner der Kontaktwinkel, desto besser fließt das Abformmaterial in die abzuformenden Bereiche.

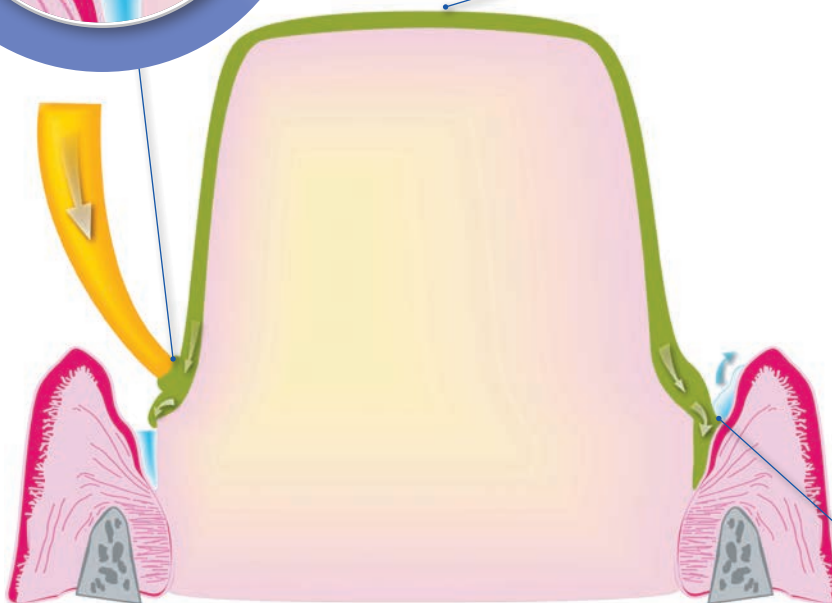

AMDA SYSTEM (ADVANCED MOISTURE DISPLACEMENT ACTION)

- ▶ Dieses System sichert eine präzise Detailwiedergabe im feuchten Mundmilieu. Die unter Druck erhöhte Fließfähigkeit, lässt das Material bis in den Sulkus fließen für eine einwandfreie Darstellung der Abdruckränder.


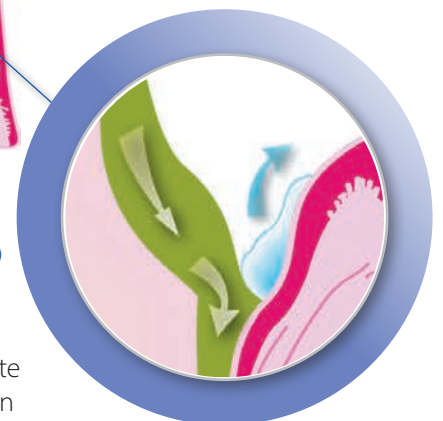


*Quelle: Zhermack, interne Daten

Zuverlässigkeit

Eine zuverlässige Arbeit, für Zahnarzt und Patienten

Die Synergie der physischen und mechanischen Eigenschaften von Hydrorise ist jedes Mal eine Garantie für den klinischen Erfolg.

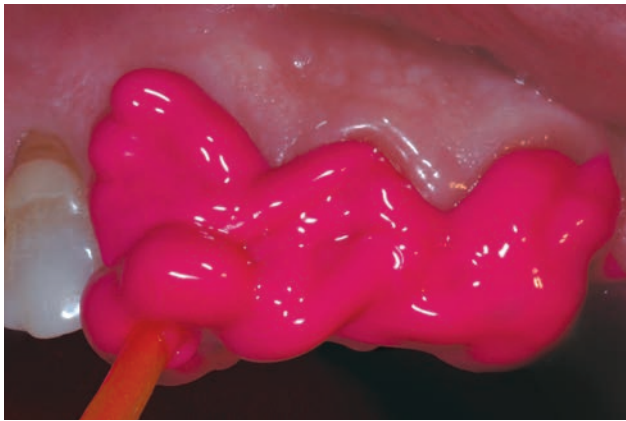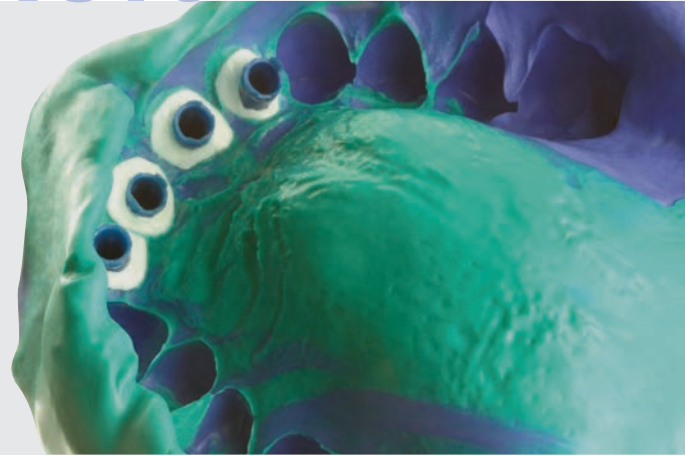

Thixotropie

- ▶ Darunter wird die Fließfähigkeit des Silikons verstanden, im Ruhezustand standfest zu sein und erst zu fließen, wenn es unter Druck gesetzt wird. Auf diese Weise kann Hydrorise nicht aus der Präparation heraus- oder in den Hals des Patienten hineinfließen.




Reißfestigkeit








- ▶ Hydrorise ist außerordentlich elastisch, insbesondere bei stark unter sich gehenden Stellen. Das Material besitzt eine hohe Reißfestigkeit und reduziert das Risiko von Verzerrungen.

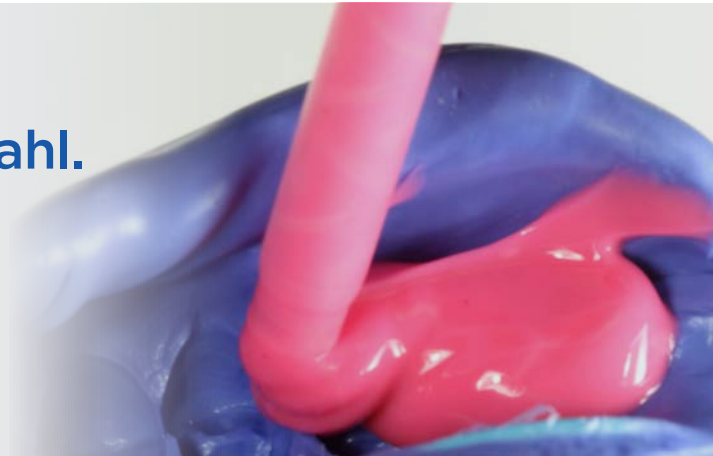Flexibilität

Individuelle Lösungen, denn der Zahnarzt hat die Wahl.

Für die unterschiedlichen Abformmethoden wurden verschiedene Viskositäten vom Hydrorise entwickelt.



Material	Doppelmischtechnik	Korrekturtechnik	Monophasentechnik
Hydrorise Putty			
Hydrorise Heavy Body			
Hydrorise Monophase			
Hydrorise Regular Body			
Hydrorise Light Body			
Hydrorise Extra Light Body			

Jede Viskosität ist als NORMAL SET (Anmischzeit 2'- Abbindezeit 5'30") und FAST SET (Anmischzeit 1'30"- Abbindezeit 4') vorhanden.

Hydrorise und Sympress: die perfekte Kombination.

Hydrorise System kann mit dem automatischen Mischgerät Sympress verwendet werden, das eigens für schnelles und einfaches Mischen von Abformmaterialien verpackt in 5:1-Kartuschen entworfen wurde.

► Zwei Geschwindigkeiten

Durch Betätigung nur einer Taste kann die Geschwindigkeit gewählt werden und die Materialausgabe den persönlichen Bedürfnissen entsprechend, gewählt werden.

► Modernes gestaltbares Design

Das kompakte und funktionelle Design spart Platz auf der Arbeitsfläche.

► Mischungsqualität

Die optimale Dosierung der Komponenten garantiert eine homogene, blasenfreie Anmischung.

► Kartusche 5:1

Die Hydrorise Maxi Kartusche mit 380 ml wurde für die Anwendung im Sympress entwickelt. Sie ist jedoch mit allen auf dem Markt erhältlichen automatischen 5:1 Anmischgeräten kompatibel.

Die dynamischen Mischkanülen sorgen für eine perfekte Anmischung ohne das Material zu überhitzen.

Der Materialverlust wird um 18% reduziert.

Der Verschlussring sorgt für eine schnelle und sichere Befestigung.



Verpackung



Hydrorise Putty - A-Silikon mit sehr hoher Viskosität

Artikelnr	Abbindezeit	Verpackung
C207010	Normal Set	Standard Pack: 300 ml Basis + 300 ml Katalysator
C207011	Fast Set	
C207012	Normal Set	Eco Pack: 900 ml Basis + 900 ml Katalysator
C207013	Fast Set	
C207071	Fast Set	Testpaket: 100 ml Basis + 100 ml Katalysator vom Putty Fast + 50 ml Light Fast + 6 Mischkanülen gelb



Hydrorise Maxi Putty - A-Silikon mit sehr hoher Viskosität

Artikelnr	Abbindezeit	Verpackung
C207044	Normal Set	Standard Pack: 2 x 380 ml Kartuschen + 15 dynamische Mischkanülen + 2 Verschlussringe
C207045	Fast Set	
C207064	Normal Set	Eco Pack: 6 x 380 ml Kartuschen + 2 Verschlussringe
C207065	Fast Set	



5:1

Hydrorise Heavy Body - A-Silikon mit hoher Viskosität

Artikelnr	Abbindezeit	Verpackung
C207008	Normal Set	Standard Pack: 2 x 50 ml Kartusche (Basis + Katalysator) + 6 Mischkanülen grün
C207009	Fast Set	
C207077	Fast Set	Testpaket: 1 x 50 ml Heavy Fast + 1 x 50 ml Light Fast + 6 Mischkanülen gelb + 3 Mischkanülen grün



Hydrorise Maxi Heavy Body - A-Silikon mit hoher Viskosität

Artikelnr	Abbindezeit	Verpackung
C207042	Normal Set	Standard Pack: 2 x 380 ml Kartuschen + 15 dynamische Mischkanülen + 2 Verschlussringe
C207043	Fast Set	
C207062	Normal Set	Eco Pack: 6 x 380 ml Kartuschen + 2 Verschlussringe
C207063	Fast Set	




5:1



Hydrorise Monophase - A-Silikon mit mittlerer Viskosität

Artikelnr	Abbindezeit	Verpackung
C207006	Normal Set	Standard Pack: 2 x 50 ml Kartusche + 6 Mischkanülen rosa
C207007	Fast Set	

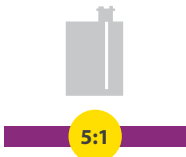

Hydrorise Maxi Monophase - A-Silikon mit mittlerer Viskosität

Artikelnr	Abbindezeit	Verpackung
C207040	Normal Set	Standard Pack: 2 x 380 ml Kartuschen + 15 dynamische Mischkanülen + 2 Verschlussringe
C207041	Fast Set	
C207060	Normal Set	Eco Pack: 6 x 380 ml Kartuschen + 2 Verschlussringe
C207061	Fast Set	



Hydrorise Regular Body - A-Silikon mit mittlerer Viskosität

Artikelnr	Abbindezeit	Verpackung
C207004	Normal Set	Standard Pack: 2 x 50 ml Kartusche (Basis + Katalysator) + 12 Mischkanülen rosa
C207005	Fast Set	



Hydrorise Light Body - A-Silikon mit niedriger Viskosität

Artikelnr	Abbindezeit	Verpackung
C207000	Normal Set	Standard Pack: 2 x 50 ml Kartusche + 12 Mischkanülen gelb
C207001	Fast Set	
C207071	Fast Set	Testpaket: 100 ml Basis + 100 ml Katalysator vom Putty Fast + 50 ml Light Fast + 6 Mischkanülen gelb
C207077	Fast Set	Testpaket: 1 x 50 ml Heavy Fast + 1 x 50 ml Light Fast + 6 Mischkanülen gelb + 3 Mischkanülen grün



Hydrorise Extra Light - A-Silikon mit sehr niedriger Viskosität

Artikelnr	Abbindezeit	Verpackung
C207002	Normal Set	Standard Pack: 2 x 50 ml Kartusche + 12 Mischkanülen gelb
C207003	Fast Set	



Geräte

Code	Modell
6000-0000	Sympress – 230 V
6000-1000	Sympress – 120 V
6000-2000	Sympress 230 V plug UK
6000-3000	Sympress 100 V

Für weiteres Zubehör zu Sympress besuchen Sie www.zhermack.com

Zubehör

C202070



Mischkanülen gelb 1:1 (48 Stk.)

C205500



Mischkanülen rosa (48 Stk.)

C202080



Mischkanülen grün (48 Stk.)

D510010



Putty Cut

C202090



Intra-Oral Tips gelb (48 Stk.)

C700025




Adhäsiv Universal - 10 ml

C202100



Mischpistole 1:1

C205530

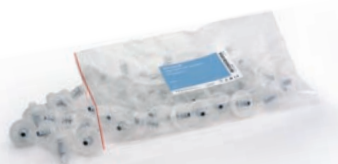

Mischkanülen dynamisch, grau (50 Stk.)

C205540



Verschlussringe, grau (2 Stk.)

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in jedem Land verfügbar. Für weitere Informationen bzgl. der Produktverfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Kundenberater.



Fulfilling your needs