

Super-Snap ■ Super-Snap X-Treme



Für mikrogefüllte und Hybridkomposite

Das Super-Snap und Super-Snap X-Treme Poliersystem besteht aus aufeinander abgestimmten beschichteten Scheiben, die zum Finieren und Polieren von mikrogefüllten und Hybridkompositen eingesetzt werden.



highlights

Extrem dünn und hochflexibel

Kein Metallzentrum

Durchgängiges System: von der Konturierung zum Hochglanz in vier Schritten

Stabiler Halt der Scheibe auf Mandrell (maximale Kontrolle während der Politur)

■ Super-Snap

Die Super-Snap Scheiben sind mit elastischen Trägern versehen, die auf das Mandrell aufgesetzt werden. Da sie kein metallisches Zentrum haben, werden versehentliche Beschädigungen und Verfärbungen von Komposit und Zahnhartsubstanz verhindert. Die dünnen Scheiben sind flexibel, biegen sich ohne zu brechen und ermöglichen einen einfachen Zugang zu den Approximalbereichen. Sie sind in den Größen Standard (ø 12 mm) und Mini (ø 8 mm) lieferbar.

■ Super-Snap X-Treme


Die Super-Snap X-Treme Polierscheiben – eine Weiterentwicklung der grünen und roten Super-Snap Scheiben – sind dicker und erlauben einen höheren Anpressdruck während der Politur. Sie zeichnen sich durch längere Standzeiten und eine erhöhte Festigkeit aus, ihre bekannte Flexibilität im interproximalen Bereich bleibt jedoch erhalten.

Anwendungsbereiche

PRAXIS

Konturieren, Finieren und Polieren bis zum Hochglanz von Komposit-Restaurationen

- Konturieren: Super-Snap Scheibe schwarz (grobe Körnung)
- Finieren: Super-Snap Scheibe violett (mittlere Körnung)
- Polieren: Super-Snap Scheibe grün (feine Körnung)
- Hochglanz: Super-Snap Scheibe rot (extrafeine Körnung)

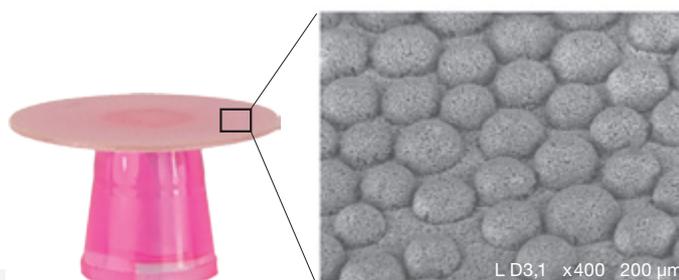

Die roten Super-Snap X-Treme Scheiben weisen erstmals eine innovative 3-D-Beschichtung auf. Zwischen den homogen verteilten Halbkugeln aus Aluminiumoxid-Partikeln kann sich der Politurabrieb ablagern und wird nach außen transportiert. Ein Zusetzen oder Verklumpen der Scheibenoberfläche und Sekundärkratzer durch Polierstaub werden so sicher verhindert.

 Min⁻¹ Max. 15.000

| | Konturieren | | Finieren | | | | Polieren | | Hochglanz | |
|-----------|----------------|------|------------------|------|------|------|----------------|------|-----------------|------|
| Scheiben | | | | | | | | | | |
| | L506 | L507 | L508 | L509 | L528 | L522 | L511 | L531 | L512 | L532 |
| | Schwarz (grob) | | Violett (mittel) | | | | Grün (fein) | | Rot (extrafein) | |
| Mandrells | | | | | | | | | | |
| | 0438 | | 0439 | | | | 0440 | | | |
| | FG | | W | | | | W (Kunststoff) | | | |

| Best.-Nr. | Menge | Produkt |
|------------|--------|---|
| Super-Snap | | |
| N0510 | 1 St. | Super-Snap Disk Kit, Schaft W |
| 0505 | 1 St. | Super-Snap Mini-Kit, Schaft W |
| L506 | 50 St. | Super-Snap Scheiben, schwarz (grob), stirnbeschichtet |
| L507 | 50 St. | Super-Snap Minischeiben, schwarz (grob), stirnbeschichtet |
| L508 | 50 St. | Super-Snap Scheiben, violett (mittel), stirnbeschichtet |
| L509 | 50 St. | Super-Snap Scheiben, violett (mittel), schaftseitig beschichtet |
| L528 | 50 St. | Super-Snap Scheiben, violett (mittel), beidseitig beschichtet |
| L522 | 50 St. | Super-Snap Minischeiben, violett (mittel), beidseitig beschichtet |
| L501 | 50 St. | Super-Snap Scheiben, grün (fein), beidseitig beschichtet |
| L519 | 50 St. | Super-Snap Minischeiben, grün (fein), beidseitig beschichtet |
| L502 | 50 St. | Super-Snap Scheiben, rot (extrafein), beidseitig beschichtet |
| L521 | 50 St. | Super-Snap Minischeiben, rot (extrafein), beidseitig beschichtet |

| Best.-Nr. | Menge | Produkt |
|--------------------|---------|--|
| Super-Snap X-Treme | | |
| N0511 | 1 St. | Super-Snap X-Treme Disk Kit, Schaft W |
| 0506 | 1 St. | Super-Snap X-Treme Standard Disk Kit |
| 0507 | 1 St. | Super-Snap X-Treme Mini Disk Kit |
| L511 | 50 St. | Super-Snap X-Treme Scheiben, grün (fein), beidseitig beschichtet |
| L512 | 50 St. | Super-Snap X-Treme Scheiben, rot (extrafein), beidseitig beschichtet |
| L531 | 50 St. | Super-Snap X-Treme Minischeiben, grün (fein), beidseitig beschichtet |
| L532 | 50 St. | Super-Snap X-Treme Minischeiben, rot (extrafein), beidseitig beschichtet |
| Mandrells | | |
| 0438 | 6 St. | FG-Mandrell * |
| 0439 | 6 St. | W-Mandrell, Stahl |
| 0440 | 100 St. | W-Mandrell, Kunststoff |

Die Super-Snap/Super-Snap X-Treme Scheiben und die Kunststoff-Mandrells sind Einwegartikel.

* FG-Schaft nur wählen, wenn langsam laufende Antriebe mit FG-Halterung zur Verfügung stehen.



Super-Snap Disk Kit (Nr. N0510)
180 Scheiben in 4 verschiedenen Körnungen (100 St. Standard / 80 St. Mini), 2 Dura-White Steine (CN1 und FL2), 1 CompoSite Fine Midispitze, 4 Winkelstück-Mandrells

Super-Snap Mini-Kit (Nr. 0505)
48 Scheiben in allen verfügbaren Körnungen (32 St. Standard / 16 St. Mini), 1 CompoSite Fine Midispitze und 1 Winkelstück-Mandrell



Super-Snap X-Treme Disk Kit (Nr. N0511)
160 Scheiben in 4 verschiedenen Körnungen (80 St. Super-Snap / 80 St. Super-Snap X-Treme), 2 Dura-White Steine (CN1 und FL2), je 2 CompoSite und CompoSite Fine Midispitze, 4 Winkelstück-Mandrells

Super-Snap X-Treme Standard Disk Kit (Nr. 0506)
je 50 Standard-Scheiben in Grün und Rot

Super-Snap X-Treme Mini-Disk Kit (Nr. 0507)
je 50 Mini-Polierscheiben in Grün und Rot